




Sistemi Antidecubito Avanzati

Talloniera a Stivale



Alcuni esempi di utilizzo

Qui con Cuscino occipitale e Poggiabraccio

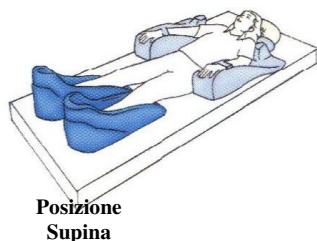

Posizione
Supina



Posizione
Semi-fowler

Zero pressioni al tallone.


Aiuta a prevenire il piede equino.

Riduce le pressioni di contatto attorno all'arto.
Permette uno stabile posizionamento del piede.
Foro alloggiamento tallone, zero pressione.
Incavo alloggiamento tendine di Achille.

In polimero Viscoelastico ad alta densità (80 kg/m^3) automedellantesi, assicura morbida protezione attorno all'arto ed aiuta a stabilizzare sia in caso di piede equino sia di torsione del tallone o dell'anca.

L'ampia altezza (31 cm) della parte frontale, protegge il piede ed elimina la necessita di una protezione addizionale.

Dati Tecnici illustrativi del Prodotto

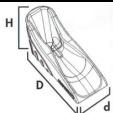Posizionatore	
Dimensioni e Peso	 H = 31 cm D = 63,5 cm d = 22 cm Peso 1,7 kg
Materiali	Polimero Viscoelastico 80 kg/m^3
Pulizia e disinfezione	Pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciar asciugare all'aria. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi, ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave a vapore sino a 134°C .
Copertura	
Copertura integrale Polymaille	Impermeabile. Traspirante. Bi-elastica. Riduce frizioni e forze di taglio e stiramento. Trattamento Anti-microorganismi. Chiusa con cerniera posta al di sotto del posizionatore. Massima protezione interna. Base antiscivolo.
Pulizia e disinfezione della copertura integrale	Lavabile a 90°C , non utilizzare candeggina, non stirare. Lavaggio a secco con solventi tipo P. Asciugare in asciugatrice a temperature moderate.
Sistema completo – Posizionatore laterale + Copertura	
Certificazioni	CE 93/42/EEC - Ignifugo in accordo con disposizioni legislative.
CFC	Completamente assente
Latex free	Completamente latex free e Ipoallergenico.

Codici prodotto		
Descrizione	Con Copertura	Copertura aggiuntiva
Talloniera a Stivale Viscoflex	P903T1HW	P903HW

Produttore	Syst'am – Villeneuve sur Lot – Francia – www.systam.com
Distribuito da	MOVI Spa – Divisione Wimed via Dione Cassio, 15 - 20135 Milano



MOVI Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 - I 20139 Milano – Tel. +39 02 509051 Fax +39 02 5062467
wimedinfo@movigroup.com - www.movigroup.com

Certified Quality System ISO 9001/13485